

**Verwendungszweck und Indikation**

Unsere Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel dient der Erhaltung, Förderung und Sicherung des Gehens in Verbindung mit einer Gehhilfe oder eines Gehstocks.

**Beachten Sie dazu auch unbedingt die Sicherheitshinweise!**

**Kontraindikation**

Nicht vorhanden.

**Allgemeine Sicherheitshinweise**

Prüfen Sie vor jeder Verwendung Ihre Gehhilfe auf ihre Funktionstüchtigkeit sowie einen festen Sitz der Kapsel. Überprüfen Sie die Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel regelmäßig auf Beschädigung oder Abnutzung und tauschen Sie diese, wenn nötig, aus. Die Griffigkeit des Untergrundes ist für den sicheren Halt der Gehhilfen entscheidend! Vermeiden Sie feuchte Böden oder Untergründe wie Kies, Sand, Laub, Eis oder Schnee! **Achten Sie auf Stolperstellen** wie Unebenheiten, Löcher im Boden, lose Bodenbeläge oder Kanten, weil die Gehhilfe dabei unerwartet wegrutschen oder einsinken kann! Besondere Vorsicht ist bei ungenügenden Lichtverhältnissen angebracht, da dann Unregelmäßigkeiten im Untergrund nur schlecht erkennbar sind!

**Montage der Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel**

Ziehen Sie das untere Rohr vorsichtig aus der Gehhilfe. Entfernen Sie die alte Gummikapsel und falls vorhanden auch den Rohrstopfen. Stellen Sie das Unterteilrohr vertikal auf ein Stück Pappe, Holz oder eine Gummimatte um den Untergrund nicht zu beschädigen. Schlagen Sie mit einem Gummihammer den Adapter in das Rohr bis er formschlüssig und fest in dem Rohr sitzt. Nun schlagen Sie ebenfalls mit dem Gummihammer die Kugelgelenkkapsel in den Adapter bis sie fest sitzt. Danach setzen Sie am anderen Ende den Rohrstopfen wieder ein und schieben das untere Rohr in die Gehhilfe. Zum tauschen der Lauffläche der Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel ziehen Sie die Lauffläche von der Kapsel und setzen die neue Lauffläche auf. **Achtung!** Prüfen Sie unbedingt den festen Sitz der Kugelgelenkkapsel und der Lauffläche. Prüfen Sie zudem die korrekte Verriegelung der Gehhilfe, indem Sie die Gehhilfe zu verdrehen und zu verschieben versuchen. Beachten Sie hierbei unbedingt die Gebrauchsanweisung der Gehhilfe. Lassen Sie sich bei der Montage vom Fachhändler helfen.

**Benutzung**

Die Gefahr des Wegrutschens oder eines Sturzes - insbesondere auf glatten und nassen Untergründen - kann bei der Verwendung von Gehhilfen niemals völlig ausgeschlossen werden. Setzen Sie die Gehstütze bzw. den Gehstock beim Laufen so senkrecht wie möglich und nicht zu weit vom Körper entfernt auf. Ein sehr schräges Aufsetzen erhöht das Sturzrisiko!

**Lagerung und Pflege**

Lagern Sie die Kugelgelenkkapsel niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Heizungen oder im KFZ auf der Ablage! Die Kapsel nicht über einen längeren Zeitraum der Sonneneinstrahlung aussetzen! Starke Sonne oder Hitze schädigen das Material! **Die Lauffläche der Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel ist ein Verschleißteil und muss regelmäßig erneuert werden. Warnung!** Kugelgelenkkapseln **niemals** mit öligen Substanzen reinigen! Rutschgefahr! Reinigen Sie die Kapsel bei Verschmutzungen gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Lappen. Verwenden Sie **niemals** lösungsmittelhaltige Reiniger, da diese das Material beschädigen! **Hinweis:** Wird eine Desinfektion notwendig, ist ein geeignetes Desinfektionsmittel zu verwenden. Bitte beachten Sie bei der Anwendung die Herstellerangaben.

**Verwendungseinschränkung**

Beschädigte und stark abgenutzte Kugelgelenkkapseln dürfen keinesfalls weiterverwendet werden, da sie keine erforderliche Sicherheit mehr bieten! **Hinweis:** Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

**Wiedereinsatz (Verleih) / Einsatzdauer**

Wir übernehmen die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz nur für das erstmalige Inverkehrbringen unserer Produkte. Einem Wiedereinsatz stimmen wir nur zu, wenn das Produkt zuvor von uns geprüft wurde. **Die Lebensdauer einer Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel ist abhängig von der Abnutzung, aber maximal begrenzt auf 2 Jahre.** Über diesen Zeitpunkt hinaus liegt die weitere Benutzung der Kapsel im Verantwortungsbereich des Benutzers.

**Gewährleistung und Haftung**

Sie haben ein hochwertiges Ossenberg-Produkt erworben. Sollte trotz höchster Qualitätsstandards ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht Ossenberg das Recht zu, im Rahmen einer 12-monatigen Gewährleistung, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen. Für Schäden, die durch die Veränderungen an unseren Produkten entstanden sind, können wir keine Haftung übernehmen. Nicht von der Gewährleistung erfasst sind Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Es dürfen nur Originalersatzteile und Zubehör verwendet werden! Für Ersatzteile, Zubehör und Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Fachhandel.

**Entsorgung**


Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften.

**Technische Daten**

REF	Bezeichnung	Rohrdurchmesser	⚖️
930	Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel	12 mm - 23 mm	200 kg

**Ersatzteile**

REF	Bezeichnung
931	Ersatzlauffläche für Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel
934	Adapter für Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel

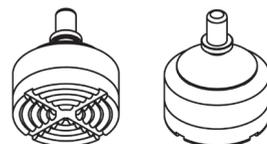

**Symbolverzeichnis**

Artikelnummer	Chargennummer	Zulässiges Körpergewicht	Lesen Sie die Bedienungsanleitung	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)
Hersteller	Herstellungsdatum	Vertrieb durch	Achtung	Medizinprodukt

**Ossenberg GmbH**  
 Kanalstraße 79  
 48432 Rheine  
 DEUTSCHLAND

**Telefon** +49 (0) 59 71- 9 80 46 0  
**Fax** +49 (0) 59 71- 9 80 46 16  
**Internet** www.ossenberg.com  
**E-Mail** info@ossenberg.com



Bei uns erhalten Sie Produkte gemäß den Richtlinien des Medizinproduktegesetzes. Des Weiteren ist die Ossenberg GmbH nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert.

DIN EN ISO 13485  
 REG.-NR. MQ1 0115318

Die aktuelle Gebrauchsanweisung finden Sie unter:  
<https://bilder.ossenberg.com/Dokumente/Downloads-zum-Artikel/Gebrauchsanweisungen/PDF/Instructions-for-use-Jolo-Renttol-ball-joint-capsule-DE.pdf>

**Intended use and indication**

Our Jolo-Renttol-ball joint capsule are used to maintain, promote and secure walking in conjunction with a walking aid or walking stick.  
**Please also be sure to read the safety instructions!**

**Contraindication**

Not available.

**General safety information**

Before each use, check your walking aid for proper functioning and a tight fit of the capsule. Check the Jolo-Renttol-ball joint capsule regularly for damage or wear and replace it if necessary. The grip of the underground is crucial for the safe hold of the walking aids! Avoid wet floors or surfaces such as gravel, sand, leaves, ice or snow!  
**Pay attention to stumbling points** like unevenness, holes in the ground, loose floor coverings or edges, because the going assistance can slip away unexpectedly or sink in! Special caution is appropriate with insufficient lighting conditions, since then irregularities in the underground are only badly recognizable!

**Mounting the Jolo-Renttol-ball joint capsule**

Carefully pull the lower tube out of the walking aid. Remove the old rubber capsule and, if present, the tube plug. Place the lower tube vertically on a piece of cardboard, wood or a rubber mat to avoid damaging the surface. Use a rubber mallet to tap the adapter into the tube until it is positively and firmly seated in the tube. Now use the rubber mallet to tap the ball joint capsule into the adapter until it is firmly seated. Then reinsert the tube plug at the other end and push the lower tube into the walking aid. To replace the tread of the Jolo-Renttol ball joint capsule, pull the tread off the capsule and put on the new tread. **Attention!** Be sure to check the tight fit of the ball joint capsule and the tread. Also check the correct locking of the walking aid by trying to turn and move the walking aid. Be sure to follow the instructions for use of the walking aid. Have the specialist dealer help you with the assembly.

**Use**

The risk of slipping or falling- especially on slippery and wet surfaces- can never be completely ruled out when using walking aids. When walking, place the crutch or walking stick as vertically as possible and not too far away from the body. A very oblique placement increases the risk of falling!

**Storage and care**

Never store the ball joint capsule near heat sources such as ovens, heaters or in the car on the shelf! Do not expose the capsule to sunlight for a longer period of time! Strong sun or heat will damage the material! **The Jolo-Renttol-ball joint capsule is a wearing part and must be replaced regularly. Warning!** Never clean the ball joint capsule with oily substances! Danger of slipping! If necessary, clean the capsule with a mild cleaning agent and a soft cloth if it is dirty. **Never** use cleaners containing solvents, as these will damage the material! **Note:** If disinfection becomes necessary, use a suitable disinfectant. Please note the manufacturer's instructions for use.

**Limitation of use**

Damaged and heavily worn ball joint capsules must not be used under any circumstances, as they no longer provide the required safety! **Note:** All serious incidents occurring in connection with the product must be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

**Re-use (rental) / duration of use**

We accept liability in accordance with the Product Liability Act only for the initial placing of our products on the market. We only agree to a reuse if the product has been tested by us beforehand. **The service life of a Jolo-Renttol-ball joint capsule depends on wear, but is limited to a maximum of 2 years.** Beyond this time, further use of the capsule is the responsibility of the user.

**Warranty and liability**

You have purchased a high-quality Ossenberg product. If, despite the highest quality standards, a justified material defect should occur, Ossenberg has the right, within the framework of a 12-month warranty, to repair the defective item or to replace it with a defect-free subsequent delivery, at its own discretion. We cannot accept any liability for damage caused by modifications to our products. Not covered by the warranty are defects that are due to wear or improper handling. Wear parts are excluded from the warranty. Only original spare parts and accessories may be used! For spare parts, accessories and repairs, please contact the specialist trade.

**Disposal**


Please consult your specialist dealer about the regional disposal regulations.

**Technical data**

REF	Name	Tube diameter	Weight
930	Jolo-Renttol-ball joint capsule	12 mm - 23 mm	200 kg

**Spare parts**

REF	Name
931	Replacement tread for Jolo-Renttol ball joint capsule
934	Adapter for Jolo-Renttol ball joint capsule

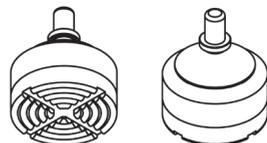

**Symbol directory**

Item number	Batch number	Permissible body weight	Read the operating instructions	This product complies with the requirements of Regulation (EU) 2017/745 (MDR).
Manufacture	Date of manufacture	Distribution by	Attention	Medical device

**Ossenberg GmbH**  
 Kanalstraße 79  
 48432 Rheine  
 GERMANY

**Phone** +49 (0) 59 71- 9 80 46 0  
**Fax** +49 (0) 59 71- 9 80 46 16  
**Internet** www.ossenberg.com  
**E-Mail** info@ossenberg.com



This is a product according to the guidelines of the Medical Devices Directive. Furthermore the Ossenberg GmbH is certified according to DIN EN ISO 13485.

DIN EN ISO 13485  
 REG-NR. MQ1 0115318

You can find the latest instructions for use at:  
<https://bilder.ossenberg.com/Dokumente/Downloads-zum-Artikel/Gebrauchsanweisungen/PDF/Instructions-for-use-Jolo-Renttol-ball-joint-capsule-EN.pdf>