

Lietošanas mērķis un indikācijas


Mūsu spieķi ir paredzēti cilvēkiem ar viegli ierobežotu mobilitāti kustību traucējumu dēļ, ar līdzsvaru traucējumiem, ja ir pietiekami saglabājusies kustību spēja, un ar koordinācijas traucējumiem. Tie kalpo pārvietošanās spējas saglabāšanai, veicināšanai un nodrošināšanai vai daļēji vienas apakšējās ekstremitātes atslodzei. Spieķus var izmantot iekšējās ārā. **Obligāti ņemiet vērā drošības norādes!**

Kontrindikācijas

Spieķi nav piemēroti, ja ir zaudētas abas augšējās ekstremitātes vai ja abām rokām ir locītavu kontraktūra/locītavu bojājumi.

Vispārējās drošības norādes

Nekariniet somas, maisus vai citus priekšmetus uz spieķa! Spieķi **nekādā gadījumā nedrīkst izmantot citiem mērķiem** nekā paredzēts, piemēram, priekšmetu ceļšanai vai pārvietošanai vai lai ieslēgtu vai izslēgtu gaisma slēdzi, vai nospiegtu pogas liftā! Pamatnes sakere ir būtiska drošai spieķa izmantošanai! Izvairieties no mitras grīdas vai tādām pamatnēm kā grants, smiltis, koku lapas, ledus vai sniegs! **Pievērsiet uzmanību** tam, vai nepakļūpsiet, piemēram, ja ir nelīdzena pamatne, caurumi grīdā, valīgs grīdas segums vai tā malas, jo spieķis var pēkšņi aizslīdēt vai iegrīmt! Ipaša uzmanība jāievēro, ja ir nepietiekams apgaismojums, jo tad šāda pamatne ir slikti pamanāma! Pielāgojot ar pogu, tai līdz galam ir jābūt izvirzītai no atveres (2. attēls)! Atveres spieķa pielāgošanai ir pakļauts zināms nodulimam. Jāpievērš uzmanība tam, ka tas nav kļūvušas plātākas, jo tad vairs nav iespējams droši nobloķēt pogu. Pielāgojot ar skavu, plastmasas skavai jābūt ievietotai tā, lai tā pilnībā saslēgtos (1. attēls)! Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai visas skrūves ir stingri pievilkta!

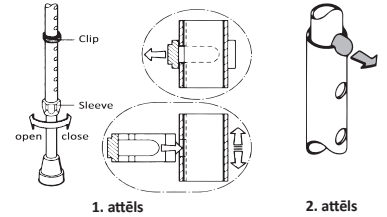


Spieķa pielāgošana

Brīdinājums! Lai iestātu atbilstoši funkcijām un ergonomiski pareizi, vērsieties pie Jūsu specializētā tirgotāja! Nepareizi iestāts spieķis var ierobežot tā funkcionalitāti vai rezultēt pacienta pārslogošanā vai nepareizi noslogošanā! Spieķis Jums kā pacientam tiek nodots atbilstoši stāvoklī un Jūsu specializētais tirgotājs vai medicīnas personāls to pielāgos atbilstoši Jūsu augumam. Ja Jūs neesat pārliecināts, vai tas tā ir, tad lūdzam vērsties pie atbildīgā specializētā personāla. Spieķis sniegs vēlētoto atslodzi tikai tad, ja tas ir optimāli pielāgots tā lietotāja auguma garumam. **Pielāgošana:** Ja Jūs spieķim ir uzgriezis, tad tas pirms iestāšanās ir jāatbrīvo, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam par apmēram pusī no pilna apgrieziena (1. attēls). Atbloķējiet augstuma regulēšanas mehānismu, piespiežot pogu vai izspiežot skavu. Pielāgojiet augstumu Jūsu auguma garumam, izvelkot vai iestumjot balsta cauruli. Atkal nobloķējiet augstuma regulēšanas mehānismu, novietojot caurules tā, ka divas bloķēšanas atveres atrodas viena virs otras, tā poga atkal noklikšķinās. Pielāgojot ar skavu, ievietojiet to atpakaļ. **Pēc pielāgošanas nepieciešams atkal stingri pievilk uzgriezni.** Spieķi ar regulējamu augstumu apakšējā daļā var tikt saīsināti maksimāli par 10 cm. Spieķiem, kurus nav iespējams pielāgot, atbalsta caurule tiek saīsināta ar metāla zāģi vai cauruļu griezēju, individuāli pielāgojot Jūsu garumam. **Uzmanību:** Nepareizi nobloķējot augstuma regulēšanas mehānismu, pastāv krišanas risks spieķim noslidot uz leju! Pēc katras pielāgošanas pārbaudiet, vai spieķis ir pareizi nobloķēts, mēģinot to pagriezt vai pastumt!

Izmantošana

Spieķa izmantošana var būt ļoti dažāda un ir atkarīga no individuālajiem kustību spējas ierobežojumiem. Ļaujiet specializētajam tirgotājam vai medicīnas personālam Jūs apmācīt par spieķa izmantošanu! Spieķus nedrīkst izmantot ūdenī. Ja tajos iekļūst ūdens, var rasties korozija, kas var veicināt salūšanas risku. Jānovērš spieķu ilgstoša saskare ar ūdeni. Ja spieķis ir kļuvis mitrs, tas ir attiecīgi jānosauka. Pareizi spieķa izmantošanai nepieciešams neliels treniņš. Šī iemesla dēļ mēs iesakām sākmā papildus atbalstīties arī pret asistējošu personu. Vienmēr izmantojiet spieķi ievainotās vai saudzējamās kājas pretējā pusē! Turiet spieķi tuvu ķermenim, nevis slīpi uz ārpusi (3. att.)! Pretējā gadījumā Jūs varat nokrist! Izmantojot spieķi, satveriet tā rokturi pilnīgi un cieši! Novietojiet spieķi pēc iespējas taisni uz zemes, lai nepaslidētu! Lai apstātos, izmantojiet krēslus ar roku balstiem. Tad, piecēloties no krēsla, Jūs varat atbalstīties pie roku balstiem! Valkājiet pēc iespējas ērtas apavus ar zemu papēdi, lai kāja var labāk izturēt papildu slodzi! **Ja Jūs tomēr nokrītat:** ļaujiet spieķim nokrist uz sāniem, lai Jūs neuzkrītat tam virsū! Ja iespējams, ļaujiet, ka Jūs pavada un atbalsta asistējoša persona, kura Jūs var notvert gadījumā, ja Jūs krītat! Ļaujiet specializētajam tirgotājam Jūs apmācīt par kāpņu izmantošanu ar spieķi! Ja kāpšanai pa kāpnēm izmantojat vienu spieķi, ar brīvo roku obligāti turieties pie margām (4. att.)! Izmantojot divus spieķus, kāpjot pa kāpnēm ņemiet abus spieķus vienā rokā un ar brīvo roku obligāti turieties pie margām (5. att.)!

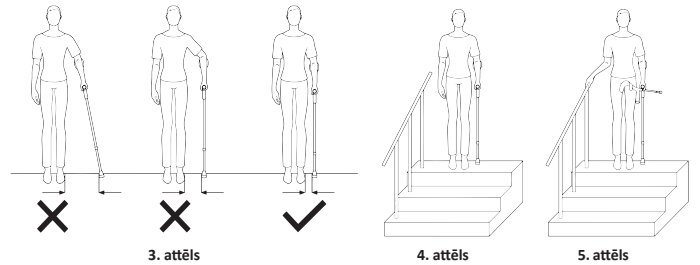

Piesardzības pasākumi

Izmantojot vienu spieķi, uz atsevišķām ķermeņa daļām ir nepierasti liela slodze! Tā rezultātā var rasties šādas nevēlamas blakusparādības: Uz plaukstām var rasties nospieduma vai nobrāzuma vietas! Ņemiet vērā, ka tas sākmā vai ilgstošas izmantošanas gadījumā var rezultēties sāpēs vai pārpūlē! Ieturiet pietiekami daudz pauzes!

Uzglabāšana un kopšana

Nekad neuzglabājiet spieķi tādu karstuma avotu tuvumā kā krāsnis, apkures iekārtas vai automašīnas salonā! Nepakļaut spieķi ilgstošai saules iedarbībai! Spēcīga saule vai karstums bojā plastmasu! Sargājiet spieķi no nokrišanas un lakas bojājumiem (piemēram, no siksas vai turētāja). **Gumijas uzgalis ir nodilstoša detaļa un tas ir regulāri jānomaina.** Ja spieķis nav lietots ilgāku laiku, to drīkst atsākt lietot tikai pēc tam, kad to ir pārbaudījis specializētais personāls. **Brīdinājums!** **Nekad** netīrīt rokturi un gumijas uzgali ar eļļainām vielām! Slīdēšanas risks! Nepieciešamības gadījumā tīriet spieķi ar saudzīgu tīrīšanas līdzekli un mikstu drānu. **Nekad** neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur šķīdinātājus, jo tie bojā plastmasu! **Norāde:** Ja ir nepieciešama dezinficēšana, jāizmanto piemērots dezinficēšanas līdzeklis. Ņemiet vērā ražotāja norādes.

Izmantošanas ierobežojumi

Spieķi var noslogot tikai saskaņā ar ražotāja norādēm. **Ņemiet vērā uz produkta norādīto maksimālo pieļaujamo ķermeņa svaru!** Lielāka noslogojuma vai šaubu gadījumā lūgums vērsties pie Jūsu specializētā tirgotāja. Saliektu vai bojātu spieķi nekādā gadījumā nedrīkst turpināt lietot, jo tas vairs nesniedz nepieciešamo stabilitāti! Salūšanas riska dēļ saliektu spieķi nedrīkst iztaisnot! **Norāde:** Visi bīstami atgādājumi saistībā ar šo produktu ir jāpaziņo ražotājam un tās dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā dzīvo lietotājs un/vai pacients.

Otrreizēja izmantošana (Nodošana) / Izmantošanas ilgums

Saskaņā ar Vācijas likumu par atbildību par produktiem (Produkthaftungsgesetz) mēs ņņemamies atbildību tikai par pirmo mūsu produktu laišanu tirgū. Mēs piekīram atkārtotai izmantošanai tikai tad, ja mēs produktu pirms tam esam pārbaudījuši. **Spieķa lietošanas laiks ir ierobežots uz 2 gadiem.** Pēc šī laika spieķa izmantošana notiek uz lietotāja atbildību.

Garantija un atbildība

Jūs esat iegādājies augstvērtīgu «Ossenberg» produktu. Ja par spīti augstākajiem kvalitātes standartiem tomēr rodas defekts, «Ossenberg» ir tiesības 12 mēnešu garantijas ietvaros izvēlēties uzlabot produktu ar defektu vai to aizstāt ar produktu bez defekta. Jāņem vērā, ka uz mūsu produktiem, it īpaši pēc pasūtījuma izgatavotiem produktiem, attiecas stingrāki tiesību aktu noteikumi. Par zaudējumiem, kas ir radušies, veicot izmaiņas mūsu produktos, mēs nevaram ņņemties atbildību. Garantijā nav iekļauti bojājumi, kas ir radušies nodiluma vai neatbilstošas izmantošanas dēļ. Nodilstošās detaļas ir izslēgtas no garantijas. Drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus! Saistībā ar rezerves daļām, piederumiem un remontu lūgums vērsties specializētajā tirdzniecības vietā.

Utilizācija

Lūgums vērsties pie Jūsu specializētā tirgotāja, lai iegūtu informāciju par reģionālajiem utilizācijas noteikumiem.

Piederumi


Jūsu spieķa atļautie piederumi ir norādīti šeit:
<https://shop.ossenberg.com/en/downloads-to-the-product/>




Izmantotie simboli

REF Preces numurs

LOT Partijas numurs


 Izlasiet lietošanas instrukciju


 Uzmanību

 Šis produkts atbilst Regulas (ES) 2017/745 (MDR) prasībām

 Ražotājs

 Izplatīšana pēc

 Ražošanas datums

 Pieļaujama ķermeņa svars

MD Medicīniskā ierīce

Ossenberg GmbH
 Kanalstraße 79
 48432 Rheine
 VÄCIJA

Tālrunis +49 (0) 59 71-9 80 46 0
Fakss +49 (0) 59 71-9 80 46 16
Internets www.ossenberg.com
E-pasts info@ossenberg.com



Šis ir izstrādājums saskaņā ar Medicīnisko ierīču direktīvas vadlīnijām.
 Turklāt Ossenberg GmbH ir sertificēta saskaņā ar DIN EN ISO 13485.

State 08.07.2021

DIN EN ISO 13485
REG.-NR. MQ1 0115318

Jaunākās lietošanas instrukcijas var atrast vietnē:
<http://bilder.ossenberg.com/Dokumente/Downloads-zum-Artikel/Gebrauchsanweisungen/PDF/Instructions-for-use-walking-sticks-LV.pdf>

Tehniskie dati

Rezerves detaļas

REF		A	B	C			
500	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
501	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
502	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	150 kg	Art. 13120	Art. 715
503	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	150 kg	-	Art. 970
505	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
506	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
507	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
508	Light metal walking stick unadjustable	A3	105 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
509	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	150 kg	Art. 13120	Art. 715
510	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	150 kg	-	Art. 970
645	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
646	Light metal walking stick unadjustable	A3	104 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
647	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
648	Light metal walking stick unadjustable	A3	102 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
655	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
656	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
669	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	120 kg	Art. 13120	Art. 715
670	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	120 kg	-	Art. 970
684	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
685	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
691	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	120 kg	Art. 13120	Art. 715
692	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
693	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	74 cm- 94 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
694	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
695	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
697	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	120 kg	-	Art. 970
3296	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
11001/11002/11005/11006	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11001-1/11002-1/11005-1/11006-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11003/11004/11007/11008/11011/11012/11015/11016/11019/11020	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11003-1/11004-1/11007-1/11008-1/11011-1/11012-1/11015-1/11016-1/11019-1/11020-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11009/11010/11013/11014	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11009-1/11010-1/11013-1/11014-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11017/11018/11021/11022	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11017-1/11018-1/11021-1/11022-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11027/11028	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11029/11030/11031/11032/11033/11034	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11301/11302/11305/11306	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11301-1/11302-1/11305-1/11306-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11303/11304/11307/11308/11311/11312/11315/11316/11325/11326	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	74 cm- 94 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11303-1/11304-1/11307-1/11308-1/11311-1/11312-1/11315-1/11316-1/11325-1/11326-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11309/11310/11313/11314	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11309-1/11310-1/11313-1/11314-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11317/11318/11321/11322	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11317-1/11318-1/11321-1/11322-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11601/11602/11603/11604	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
11601-1/11602-1/11603-1/11604-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
11605/11606/11607/11608/11609/11610	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
11605-1/11606-1/11607-1/11608-1/11609-1/11610-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
11611/11612/11613/11614/11615	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
11611-1/11612-1/11613-1/11614-1/11615-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
11631/11632	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
11633/11634/11635/11636	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
3321/3322	Light metal walking stick adjustable	A2	85 cm- 108 cm	19 mm	180 kg	Art. 13123	Art. 719
691 - KIDDY	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	54 cm- 74 cm	16 mm	120 kg	Art. 13120	Art. 716
693XL/695XL	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	86 cm- 106 cm	19 mm	160 kg	Art. 13123	Art. 719

