

Lietošanas mērķis un indikācijas


Mūsu pārvietošanās palīgīdzekļi ir paredzēti cilvēkiem ar būtiski ierobežotu mobilitāti kustību traucējumu dēļ, ar līdzsvara traucējumiem, ja ir pietiekami saglabājusies kustību spēja, un ar koordinācijas traucējumiem. Tie kalpo pārvietošanās spējas saglabāšanai, veicināšanai un nodrošināšanai vai daļējai līdz pilnīgai vienas apakšējās ekstremitātes atlogošanai. Pārvietošanās palīgīdzekļus var izmantot iekšējās un ārē. **Obligāti ņemiet vērā drošības norādes!**

Kontraindikācijas

Pārvietošanās palīgīdzekļi nav piemēroti, ja ir zaudētas abas augšējās ekstremitātes vai ja abām rokām ir locītavu kontraktūra/locītavu bojājumi. Kruķi nav paredzēti izmantošanai sporta aktivitāšu laikā. Kruķi nav piemēroti vai paredzēti ķermeņa svara atbalstam pēc lēcieniem (piemēram, pa kāpnēm).

Vispārējās drošības norādes

Nekariniet somas, maisus vai citus priekšmetus uz pārvietošanās palīgīdzekļa! Pārvietošanās palīgīdzekļus **nekādā gadījumā nedrīkst izmantot citiem mērķiem** nekā paredzēts, piemēram, priekšmetu celšanai vai pārvietošanai vai lai ieslēgtu vai izslēgtu gaisma slēdzi, vai nospiegtu pogas liftā! Pamatnes sakāre ir būtiska drošai pārvietošanās palīgīdzekļu izmantošanai! Izvairieties no mitras grīdas vai tādām pamatnēm kā grants, smiltis, koku lapas, ledus vai sniegs! **Pievērsiet uzmanību** tam, vai nepaklupsiet, piemēram, ja ir nelīdzena pamatne, caurumi grīdā, vaļņi grīdas segums vai tā malas, jo pārvietošanās palīgīdzekļus var pēkšņi aizslīdēt vai iegrimt! Īpaša uzmanība jāievēro, ja ir nepietiekams apgaismojums, jo tad šāda pamatne ir slikti pamanāma! Pielāgojiet ar pogu, tai līdz galam ir jābūt izvirzītai no atveres (2. attēls)! Atveres pārvietošanās palīgīdzekļu pielāgošanai ir pakļautas zināmsam nodilumam. Jāpievērš uzmanība tam, ka tās nav kļuvušas plātākas, jo tad vairs nav iespējams droši nobloķēt pogu. Pielāgojot ar skavu, plastmasas skavai jābūt ievietotai tā, lai tā pilnībā saslēgtos (1. attēls)! Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai visas skrūves ir stingri pievilktas! Izmantojot **elkoņa pārvietošanās palīgīdzekļus ar noslēgtu rokas aproci**, jāpievērš uzmanība tam, ka aproce netiek neapzināti nospiesta uz leju, jo tā var saspīest ādu vai pirkstus.

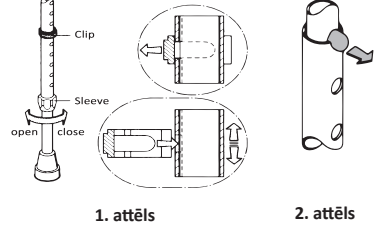

1. attēls

2. attēls


Pārvietošanās palīgīdzekļa pielāgošana

Brīdinājums! Lai iestatītu atbilstoši funkcijām un ergonomiski pareizi, vērsieties pie Jūsu specializētā tirgotāja! Nepareizi iestatīti pārvietošanās palīgīdzekļi var ierobežot to funkcionalitāti vai rezultēt pacienta pārslodzēšanu vai nepareizi noslogošanu! Pārvietošanās palīgīdzekļi Jums kā pacientam tiek nodoti atbilstošā stāvoklī un Jūsu specializētais tirgotājs vai medicīnas personāls tos pielāgos atbilstoši Jūsu augumam. Ja Jūs neesat pārliecināts, vai tas tā ir, tad lūdzam vērsties pie atbildīgā specializētā personāla. Pārvietošanās palīgīdzekļus sniegs vēlētā atslodzē tikai tad, ja tas ir optimāli pielāgots tā lietotāja auguma garumam. **Pielāgošana:** Ja Jūsu pārvietošanās palīgīdzeklim ir uzgrieznis, pirms regulēšanas tas ir jāatbrīvo par aptuveni vienu pagrieziena pulksteņrādītāja kustības virzienā (1. attēls). Atbloķējiet augstuma regulēšanas mehānismu, piespiežot pogu vai izspiežot skavu. Pielāgojiet balstu augstumu Jūsu auguma garumam, izvelkot vai iestumjot balsta cauruli. Atkal nobloķējiet augstuma regulēšanas mehānismu, novietojot caurules tā, ka divas bloķēšanas atveres atrodas viena virs otras, tā poga atkal nofiksējas. Pielāgojot ar skavu, ievietojiet to atpakaļ. **Pēc pielāgošanas nepieciešams atkal stingri pievilkt uzgriezni.** Pārvietošanās palīgīdzekļi ar regulējamu augstumu apakšējā daļā var tikt saīsināti maksimāli par 10 cm. Pārvietošanās palīgīdzekļiem, kurus nav iespējams pielāgot, atbalsta caurule tiek saīsināta ar metāla zāģi vai cauruļu griezēju, individuāli pielāgojot Jūsu garumam. **Uzmanību!** Nepareizi nobloķējot augstuma regulēšanas mehānismu, pastāv krišanas risks pārvietošanās palīgīdzekļiem noslīdot uz leju! Pēc katras pielāgošanas pārbaudiet, vai pārvietošanās palīgīdzeklis ir pareizi nobloķēts, mēģinot pagriezt vai pastumt balstu! Anatomisko cieta rokturi var pielāgot aksiāli. Lai pielāgotu, rīkojieties šādi: 1. Izspiediet reflektoru no priekšējā roktura. 2. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi, to pagriežot sešas līdz astoņas reizes. 3. Pavelciet rokturi uz priekšā un pielāgojiet. 4. Atkal pievelciet stiprinājuma skrūvi un ievietojiet reflektoru atpakaļ. Tam Jūs varat izmantot komerciāli pieejamu seškanšu atslēgu.

Izmantošana

Pārvietošanās palīgīdzekļu izmantošana var būt ļoti dažāda un ir atkarīga no individuālajiem kustību spējas ierobežojumiem. Ļaujiet specializētajam tirgotājam vai medicīnas personālam Jūs apmācīt par pārvietošanās palīgīdzekļu izmantošanu! Pārvietošanās palīgīdzekļus nedrīkst izmantot ūdenī. Ja tajos iekļūst ūdens, var rasties korozija, kas var veicināt salūšanas risku. Jānovērš pārvietošanās palīgīdzekļu ilgstoša saskare ar ūdeni. Ja pārvietošanās palīgīdzekļi ir kļuvuši mitri, tie ir attiecīgi jānoslauka. Pareizai pārvietošanās līdzekļa izmantošanai nepieciešams neliels treniņš. Šī iemesla dēļ mēs iesakām sākumā papildus atbalstīties arī pret asistējošu personu. Mēs iesakām izmantot pārvietošanās palīgīdzekļi pāri, lai atbalstītos abās pusēs! Ja Jūs izmantojat tikai vienu balstu, tad vienmēr izmantojiet to ievainotās vai saudzējamās kājas pretējā pusē! Turiet pārvietošanās palīgīdzekļus tuvu ķermenim, nevis slīpi uz ārpusi (3. att.). Pretējā gadījumā Jūs varat nokrist! Izmantojot pārvietošanās palīgīdzekļi(-)us, satveriet tā rokturi(-)us pilnīgi un cieši! Novietojiet pārvietošanās palīgīdzekļus pēc iespējas taisni uz zemes, lai nepaslidētu! Lai apsēstos, izmantojiet krēslus ar roku balstiem. Tad, pieceloties no krēsla, Jūs varat atbalstīties pie roku balstiem! Valkājiet pēc iespējas ērtākus apavus ar zemu papēdi, lai kāja var labāk izturēt papildu slodzi! **Ja Jūs tomēr nokrītat:** Ļaujiet pārvietošanās palīgīdzeklim nokrist uz sāniem, lai Jūs neuzkrītu tam virsū! Ja iespējams, ļaujiet, ka Jūs pavada un atbalsta asistējoša persona, kura Jūs var notvert gadījumā, ja Jūs krītat!

Kāpņu izmantošana: Ļaujiet specializētajam tirgotājam Jūs apmācīt par kāpņu izmantošanu ar pārvietošanās palīgīdzekļiem! Ja kāpšanai pa kāpnēm izmantojat tikai vienu pārvietošanās palīgīdzekli, ar brīvo roku obligāti turieties pie margām (4. att.)! Izmantojot divus pārvietošanās palīgīdzekļus, kāpjot pa kāpnēm ņemiet abus pārvietošanās palīgīdzekļus vienā rokā un ar brīvo roku obligāti turieties pie margām (5. att.)! Kāpjot pa kāpnēm, nepaļaujieties tikai uz kruķiem, bet vienmēr izmantojiet kāpšanas pa kāpnēm palīgīdzekli, kas ir neatkarīgs no kruķiem, piemēram, margas.

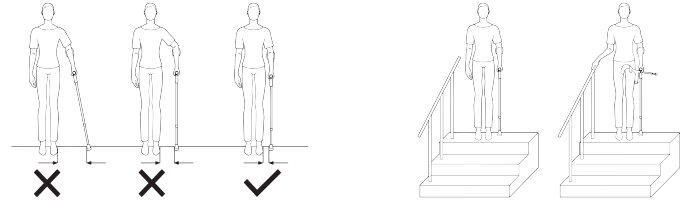

3. attēls

4. attēls

5. attēls

Piesardzības pasākumi

Izmantojot vienu pārvietošanās palīgīdzekli, uz atsevišķām ķermeņa daļām ir nepierasti liela slodze! Tā rezultātā var rasties šādas nevēlamas blakusparādības: Uz plaukstām, rokām vai apģērba var rasties nospieduma vai nobrāzuma vietas! Lai no tā izvairītos, mēs iesakām izmantot rokturu un balstu polsterus. Ja Jūs izmantojiet divus pārvietošanās palīgīdzekļus, nesiet visu ķermeņa svaru ar rokām un pleciem! Ņemiet vērā, ka tas sākumā vai ilgstošas izmantošanas gadījumā var rezultēties sāpēs vai pārpūlē! Ieturiet pietiekami daudz pauzes!

Uzglabāšana un kopšana

Nekad neuzglabājiet pārvietošanās palīgīdzekļus tādu karstuma avotu tuvumā kā krāsnis, apkures iekārtas vai automašīnas salonā! Pārvietošanās palīgīdzekļus nepakļaut ilgstošai saules iedarbībai! Spēcīga saule vai karstums bojā plastmasu! Sargājiet pārvietošanās palīgīdzekļi no nokrišanas un laka bojājumiem (piemēram, no siksnas vai turētāja). **Gumijas uzgalis ir nodilstoša detaļa un tas ir regulāri jānomaina.** Ja pārvietošanās palīgīdzekļi nav lietoti ilgāku laiku, tos drīkst atsākt lietot tikai pēc tam, kad to ir pārbaudījis specializētais personāls. **Brīdinājums!** Nekad netīrīt rokturus un gumijas uzgaļus ar eļļainām vielām! Slīdēšanas risks! Nepieciešamības gadījumā tīriet pārvietošanās palīgīdzekļus ar saudzīgu tīrīšanas līdzekli un mīkstu drānu. **Nekad neizmantojiet tīrīšanas līdzekli, kas satur šķīdinātājus, jo tie bojā plastmasu!** **Norāde:** Ja ir nepieciešama dezinficēšana, jāizmanto piemēroti dezinficēšanas līdzekļi. Ņemiet vērā ražotāja norādes.

Izmantošanas ierobežojumi

Pārvietošanās palīgīdzekļi var noslogot tikai saskaņā ar ražotāja norādēm. **Ņemiet vērā uz produkta norādīto maksimālo pieļaujamo ķermeņa svaru!** Lielāka noslogojuma vai šaubu gadījumā lūgums vērsties pie Jūsu specializētā tirgotāja. Kruķi nav paredzēti izmantošanai sporta aktivitāšu laikā. Kruķi nav piemēroti ķermeņa svara atbalstam pēc lēcieniem (piemēram, pa kāpnēm). Saliectus vai bojātus pārvietošanās palīgīdzekļus nekādā gadījumā nedrīkst turpināt lietot, jo tie vairs nesniedz nepieciešamo stabilitāti! Salūšanas riska dēļ saliektus pārvietošanās palīgīdzekļus nedrīkst iztaisnot! **Norāde:** Visi bīstamie atgadījumi saistībā ar šo produktu ir jāpaziņo ražotājam un tās dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā dzīvo lietotājs un/vai pacients.

Otrreizēja izmantošana (Nodošana) / Izmantošanas ilgums

Saskaņā ar Vācijas likumu par atbildību par produktiem (Produkthaftungsgesetz) mēs uzņemamies atbildību tikai par pirmo mūsu produktu laišanu tirgū. Mēs piekrītam atkārtotai izmantošanai tikai tad, ja mēs produktu pirms tam esam pārbaudījuši. **Elkoņa pārvietošanās palīgīdzekļu lietošanas laiks ir ierobežots uz 2 gadiem.** Pēc šī laika elkoņa pārvietošanās palīgīdzekļu izmantošana notiek uz lietotāja atbildību.

Garantija un atbildība

Jūs esat iegādājies augstvērtīgu «Ossenberg» produktu. Ja par spīti augstākajiem kvalitātes standartiem tomēr rodas defekts, «Ossenberg» ir tiesības 12 mēnešu garantijas ietvaros izvēlēties uzlabot produktu ar defektu vai to aizstāt ar produktu bez defekta. Jāņem vērā, ka uz mūsu produktiem, it īpaši pēc pasūtījuma izgatavotiem produktiem, attiecas stingrāki tiesību aktu noteikumi. Par zaudējumiem, kas ir radušies, veicot izmaiņas mūsu produktos, mēs nevaram uzņemties atbildību. Garantijā nav iekļauti bojājumi, kas ir radušies nodiluma vai neatbilstošas izmantošanas dēļ. Nodilstošās detaļas ir izslēgtas no garantijas. Drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus! Saistībā ar rezerves daļām, piederumiem un remontu lūgums vērsties specializētajā tirdzniecības vietā.

Utilizācija


Lūgums vērsties pie Jūsu specializētā tirgotāja, lai iegūtu informāciju par reģionālajiem utilizācijas noteikumiem.

Tehniskie dati

REF		A	B	C	D	
220	KLASSIKER	A1 / A2	23 cm	76 cm - 96 cm	16 mm	140 kg
2201	KLASSIKER unadjustable	A3	23 cm	103 cm	19 mm	140 kg
220ST	KLASSIKER with shock absorber	A2	23 cm	81,5 cm - 96,5 cm	16 mm	140 kg
220Carbon	KLASSIKER Carbon	A1	23 cm	76 cm - 96 cm	18 mm	140 kg
230	BIG XXL	A1	23 cm	84 cm - 104 cm	19 mm	150 kg
230UE	BIG XXL extra long	A1	23 cm	88 cm - 108 cm	19 mm	150 kg
2301	BIG XXL unadjustable	A3	23 cm	103 cm	22 mm	150 kg
242	KIDDY	A1 / A2	14,5 cm - 17,5 cm	57 cm - 74,5 cm	16 mm	100 kg
3311	GOLIAT	A3	24 cm	105 cm	22 mm	180 kg
3311UE	GOLIAT extra long	A3	27 cm	120 cm	22 mm	180 kg
320	JUNIOR	A1 / A2	21 cm - 26 cm	70 cm - 90 cm	16 mm	100 kg
332 / 332E	BIG XL	A2	22,5 cm - 27,5 cm	73 cm - 103 cm	19 mm	150 kg
332UE / 332EUE	BIG XL extra long	A2	22,5 cm - 27,5 cm	78 cm - 108 cm	19 mm	150 kg
332ST	BIG XL shock absorber	A2	22,5 cm - 27,5 cm	76 cm - 91 cm	19 mm	150 kg
521 / 521E	EASY	A1 / A2	23 cm	73 cm - 94 cm	16 mm	130 kg
5211	EASY unadjustable	A3	24 cm	105 cm	19 mm	130 kg

Rezerves detaļas

Art. 13120	Art. 15227	Art. 716
-	Art. 15227	Art. 719
Art. 13120	Art. 15227	Art. 716
-	Art. 15227	Art. 929P
-	Art. 15227	Art. 719
-	Art. 15227	Art. 719
-	Art. 15227	Art. 723
Art. 13120	Art. 15227	Art. 716
-	Art. 15227	Art. 723
-	Art. 15227	Art. 723
Art. 13120	Art. 15227	Art. 716
Art. 13123	Art. 15227	Art. 719
Art. 13123	Art. 15227	Art. 719
Art. 13123	Art. 15227	Art. 719
Art. 13120	Art. 15227	Art. 716
-	Art. 15227	Art. 719

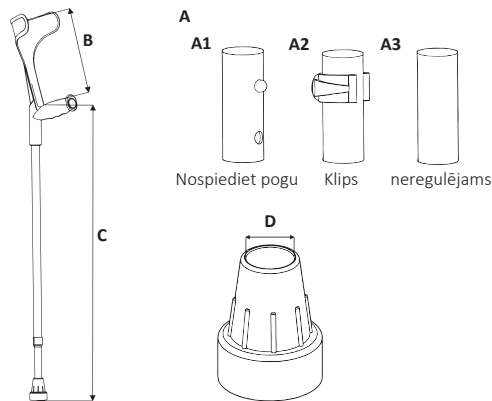

Piederumi

Jūsu pārvietošanās palīg līdzekļa atļautie piederumi ir norādīti šeit:
<https://shop.ossenberg.com/en/downloads-to-the-product/>



Izmantotie simboli



Preces numurs



Partijas numurs



Izlasiet lietošanas instrukciju



Uzmanību



Šis produkts atbilst Regulas (ES) 2017/745 (MDR) prasībām



Ražotājs



Izplatīšana pēc



Ražošanas datums



Pieļaujamais ķermeņa svars



Medicīniskā ierīce

Ossenberg GmbH
 Kanalstraße 79
 48432 Rheine
 VÄCIJA

Tālrunis +49 (0) 59 71-9 80 46 0
 Fakss +49 (0) 59 71-9 80 46 16
 Internets www.ossenberg.com
 E-pasts info@ossenberg.com



DIN EN ISO 13485
 REG.-NR. MQI 0115318

Šis ir izstrādājums saskaņā ar Medicīnisko ierīču direktīvas vadlīnijām.
 Turklāt Ossenberg GmbH ir sertificēta saskaņā ar DIN EN ISO 13485.

State 06.10.2023