



Påtænkt anvendelse

Grebshjælpen gør det lettere for personer med nedsat armfunktion at til at samle og lægge genstande af næsten enhver art op og væk.

1. Generelle produktoplysninger

Gribemidlerne er kendetegnet ved følgende egenskaber:

- ergonomisk formet håndtag
- gummibelagt gribeflade til sikker opsamling af små dele
- integreret magnet til opsamling af små, metalliske genstande
- håndrem til sikker brug

2. Brug

- Hold gribehjælpen i håndtaget med den ene hånd.
- Træk i håndtaget for at aktivere håndtagmekanismen, og griberen lukker.
- Når du slipper løftmekanismen, åbnes griberen igen.

Tip:

Grebshjælpen skal anvendes med forsigtighed, da andre personer kan komme til skade eller genstande beskadiges, hvis den uforsigtig adfærd, kan andre personer komme til skade eller genstande beskadiges.

3. Materiale

Håndtaget og griberen er fremstillet af en acrylonitrilbutadien-styren-copolymer (ABS-plast). copolymer (ABS plast), røret er fremstillet af aluminium, håndledsremmen er fremstillet af polypropylen (PP), og den skridsikre belægning er fremstillet af gummi.

4. Rengøring

Tør gribehjælpen af med en fugtig klud og om nødvendigt med et mildt rengøringsmiddel, og lad den tørre.

5. Vedligeholdelse

- Gribehjælpen er vedligeholdelsesfri.
- Hvis gribehjælpen viser fejl, skal du kontakte forhandleren for at få den udskiftet.


6. Bortskaffelse

Spørg din forhandler om de regionale bortskaffelsesregler.

7. Garanti og ansvar

Du har købt et produkt af høj kvalitet. Hvis der på trods af de højeste kvalitetsstandarder skulle opstå en berettiget materialefejl, har Kowsky-virksomheden ret til inden for rammerne af en 12-måneders garanti at reparere den defekte vare eller erstatte den med en fejlfri efterfølgende levering efter eget valg. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for skader forårsaget af ændringer af produktet. Fejl, der skyldes slitage eller forkert håndtering, er ikke dækket af garantien. Sliddele er udelukket fra garantien.

Ergonomisk håndtag med integreret magnet i enden af håndtaget

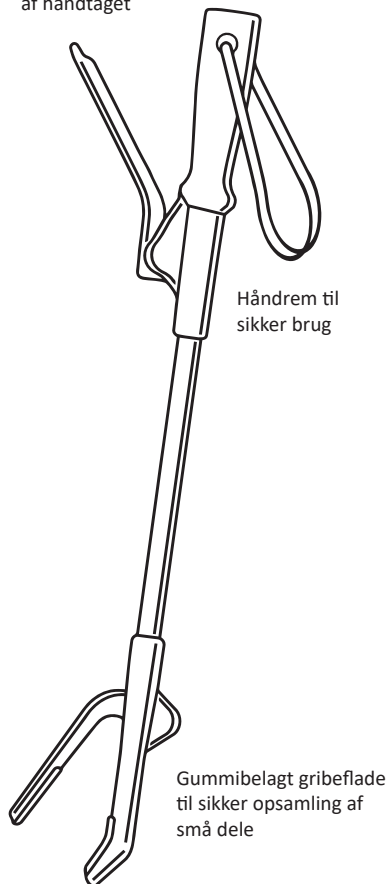

Håndrem til sikker brug

Gummibelagt gribeflade til sikker opsamling af små dele

Fås i forskellige længder:

Artikel nr.	Samlet længde	Vægt
2470-40	40 cm	140 g
2470-60	60 cm	165 g
2470-70	70 cm	175 g
2470-80	80 cm	185 g
2470-100	100 cm	230 g

